「Fine介護」に変えてみませんか!!


力任せの介護

- ✓ 不安と苦痛
- ✓ 拘縮や褥瘡
- ✓ 腰痛や関節痛
- ✓ 寝たきりの放置



ノーリフティングケア
やさしい介護

- ● 笑顔で移乗
- ● 快適な生活
- ● 安全で安楽
- ● 自立化で元気

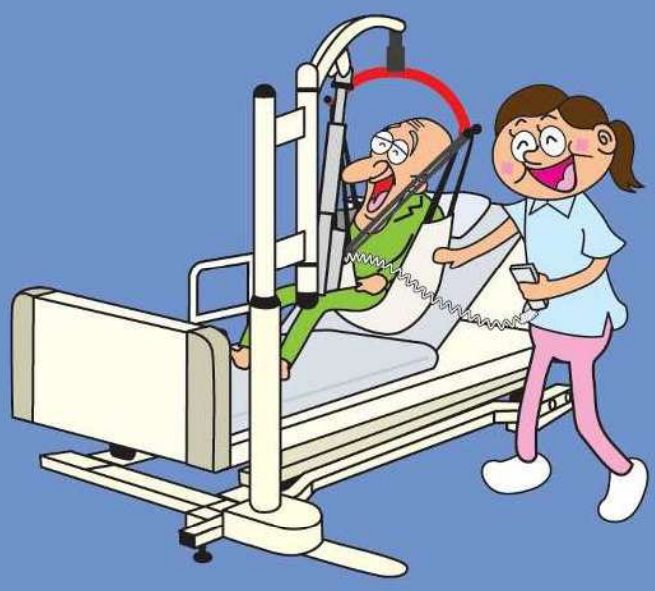

プロが教える 吊り具選定のコツ

大切な基本

❶首の支えが不安定な場合はフルタイプ。
❷スタンダードの車いすを使用している方にはハーフタイプ。
❸サイズは小さめを選ぶ。(脚分離型はサイズが大きいとお尻が下にずれやすい)

シートタイプの利点と欠点

利　点 ベッド上での装着が極めて簡単。
欠　点 車いす上での着脱ができないため敷いたままになる。

脚分離タイプの利点と欠点

利　点 車いすに座った状態で着脱可能。
欠　点 緩めると体動でずれやすい。(着脱の練習(フル)が必要)

シートタイプ　スタンダード生活編

1.室内での移動が主で頻繁に移乗する場合
2.老々介護の場合
3.お風呂で使用する場合
4.重度の障害を持っている方の場合

脚分離タイプ　アクティブ生活編


1.外出が多く比較的アクティブな生活をされる人には脚分離タイプ
2.排泄を目的としてリフトを使用する場合(おむつの開閉が可能)

ハーネス、ぶらん歩　レベルアップ生活編

1.離床を目指しベッドサイドでアクティブな生活活動を進める


ハーフ


シートタイプ

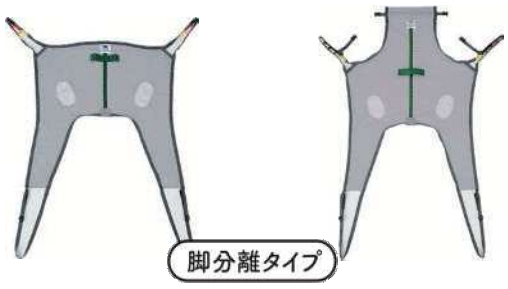
脚分離タイプ


ハーネス


ぶらん歩

介護リフトの専門メーカー
MORITOH CORPORATION
株式会社モリトー
お客様相談室 0120-65-2525 (ローゴ ニコニコ)
〒491-0074 愛知県一宮市東島町 3-36
営業所：札幌・仙台・埼玉・東京・中部・大阪・岡山・福岡
HP

起居動作が難しくなってきた方へ

七つの離床提案



1. 全介助



2. 端座位



3. 立　位



4. 排　泄



5. 座位移動



6. 立位歩行

7. 入　浴

介護リフトつるべー：ベット用リフト、床走行リフト、室内・浴室設置型リフトは介護保険レンタル対象品です
スリングシート、ハーネス、ぶらん歩は介護保険特定福祉用具販売対象品です。