

据え置き型手すり

よかレール



株式会社プラッツ <https://www.platz-ltd.co.jp>

■ 本社／ショールーム

〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-3-17
TEL: 092-584-3434 FAX: 092-584-3436

■ 北海道支店

〒003-0005 北海道札幌市白石区東札幌五条1-2-22-102
TEL: 011-807-4750 FAX: 011-807-4751

■ 東北支店

〒983-0014 宮城県仙台市宮城野区高砂1-1-15
TEL: 022-781-7072 FAX: 022-781-7062

■ 関東支店・関東ショールーム

〒143-0006 東京都大田区平和島6-1-1 TRCセンタービル7階
TEL: 03-5763-5425 FAX: 03-5763-5426

■ 東海支店・東海ショールーム

〒465-0025 愛知県名古屋市中東区上社1-402
TEL: 052-737-2230 FAX: 052-737-2231

■ 関西支店・関西ショールーム

〒578-0911 大阪府東大阪市中新開1-4-12
TEL: 072-943-2723 FAX: 072-943-2724

■ 中四国支店

〒721-0907 広島県福山市春日町7-2-6
TEL: 084-946-6000 FAX: 084-946-6040

■ 九州支店(本社内)

〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-3-17
TEL: 092-584-3433 FAX: 092-502-3810

【お問い合わせ】

24.12 CZZ00043



株式会社プラッツ

「立ち上がり」や「移動」が不安なところに“置くだけ”

いつもの動作に安心感を。

取り付け工事が不要で、
置き場所を選びません。

起き上がりや立ち上がりをサポートする、
据え置き型手すりです。

細かな高さ調節と4本の手すりで、
幅広い身長の方に、様々な姿勢で
お使いいただけます。

特長 1. 使う人や場所に フィット!

5段階の高さ調節で、幅広い
使い方に対応

手すりの高さは70～86
cm。横手すりを4本配
置し、4cm刻み(70/
74/78/82/86cm)
の5段階で高さ調節が
できるので、幅広い体格
の方や様々な使い方に
対応できます。



手すり同士を連結することで、
より広い動線をサポート

手すりは3台まで連結できます。ベッドから出入口、
廊下から居室など、より広い動線を切れ間なくサポ
ートします。



※連結方法の詳細はP6へ

PJ01-AS
センタータイプ

特長 2. しっかり支える!

握りやすい手すり


スチール芯材に樹脂をコーティングした、
公共施設などでも採用されている材質
で、強度と握り心地を両立させています。
太さは握りやすく力が入れやすい直径
3.2cmです。



特長 3. 安全に使える!


暗くても手すりの位置を把握できる

夜間でも手すりの場所がわかり
やすい蓄光リング付き。寝て
いる時に眩しすぎないよう、取
付位置に配慮しています。

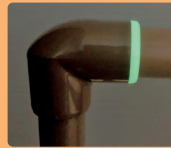

手すりの揺れを軽減

手すり部分の固定には貫通式
のピンを2本使用し、揺れを軽
減しています。

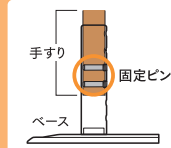

つまずきにくく、しっかり安定

ベースの厚みは薄型の13mm。
縁のゴムをスロープ状に取り付け、
つまずきにくさに配慮しています。
また、ベースに使用するマットの裏
面は吸着面になっており、取り外
して洗濯できるため衛生的にご使用できます。



製品ラインナップ



【センタータイプ】

【サイドタイプ】



【ロングタイプ】

【コーナータイプ】

※各製品の詳細はP3～4へ

「よかレール」は
こんな場所、こんな時に最適!

リビングで



椅子・ソファ、
床からの
立ち上がり



布団からの
立ち上がり



寝室で



ベッドからの
立ち上がり



廊下や居室内で




歩行の支えに



よかレール

【コストパフォーマンスに優れた据え置き型手すり】

ベースがコンパクトで置き場所をとりません

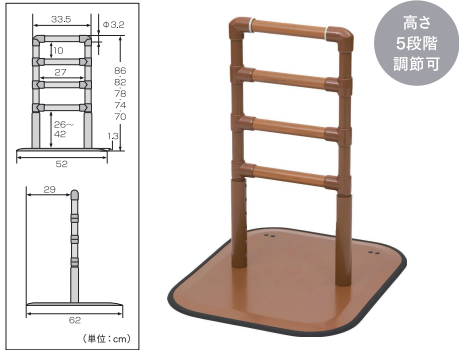


センタータイプ

PJ01-AS | メーカー希望小売価格 **45,000円**(税込49,500円)

■TAISコード/00631-000722 ■JANコード/4539940180054

■材質/手すり: スチール・樹脂、支柱: スチール、ベース: スチール・樹脂・合成ゴム
■質量/13.0kg ■最大使用者体重/100kg ■原産国/インドネシア

布団やベッドからの起き上がり・立ち上りに

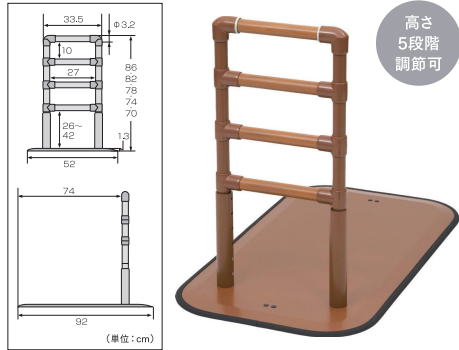

サイドタイプ

PJ01-AL | メーカー希望小売価格 **50,000円**(税込55,000円)


■TAISコード/00631-000723 ■JANコード/4539940180078

■材質/手すり: スチール・樹脂、支柱: スチール、ベース: スチール・樹脂・合成ゴム
■質量/17.0kg ■最大使用者体重/100kg ■原産国/インドネシア

居室や廊下、玄関などでの歩行の補助に



支柱の取り付け位置は、中央と端の2パターン

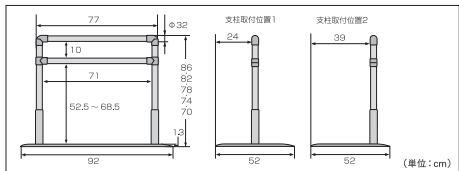


ロングタイプ

PJ01-BL | メーカー希望小売価格 **50,000円**(税込55,000円)

■TAISコード/00631-000724 ■JANコード/4539940180092

■材質/手すり: スチール・樹脂、支柱: スチール、ベース: スチール・樹脂・合成ゴム
■質量/17.5kg ■最大使用者体重/100kg ■原産国/インドネシア

起き上がりから歩き出までをサポート

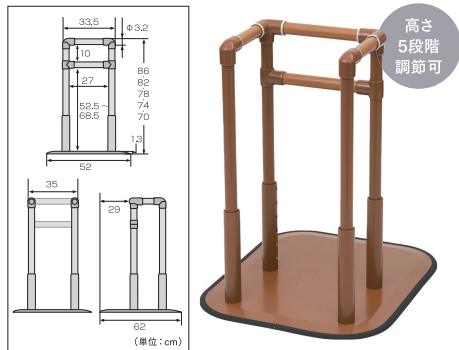

コーナータイプ

PJ01-CS | メーカー希望小売価格 **60,000円**(税込66,000円)

■TAISコード/00631-000725 ■JANコード/4539940180115


■材質/手すり: スチール・樹脂、支柱: スチール、ベース: スチール・樹脂・合成ゴム
■質量/13.5kg ■最大使用者体重/100kg ■原産国/インドネシア

●シチュエーション別の使用例




専用オプション

よかレール マット

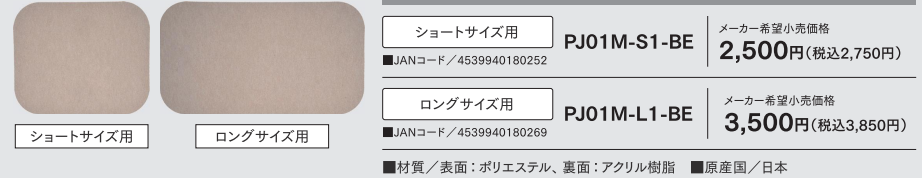

手すり同士をつなぐことで、動線を切れ間なくサポートします。

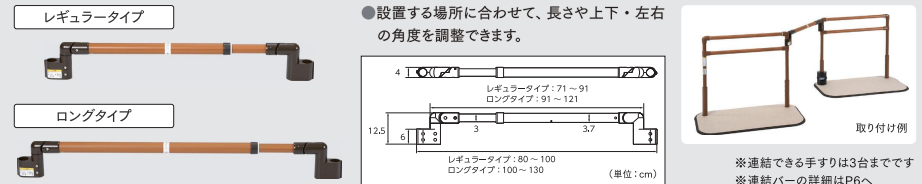

よかレール オプション組み合わせコード一覧


オプション 組み合わせ	手すりのみ	手すり + ストッパー	手すり + おもし	手すり + 連結バー(R)	手すり + 連結バー(R) + おもし	手すり + 連結バー(L)	手すり + 連結バー(L) + おもし
センタータイプ	型式 PJ01-AS TAISコード 00631-000722	型式 PJ01-AS-T TAISコード 00631-000731	型式 PJ01-AS-5Z TAISコード 00631-000765	型式 PJ01-AS-R1 TAISコード 00631-000800	型式 PJ01-AS-5Z-R1 TAISコード 00631-000804	型式 PJ01-AS-L1 TAISコード 00631-000801	型式 PJ01-AS-5Z-L1 TAISコード 00631-000805
	型式 PJ01-ASM1 TAISコード 00631-000726	型式 PJ01-ASM1-T TAISコード 00631-000735	型式 PJ01-ASM1-5Z TAISコード 00631-000766	型式 PJ01-ASM1-R1 TAISコード 00631-000802	型式 PJ01-ASM1-5Z-R1 TAISコード 00631-000806	型式 PJ01-ASM1-L1 TAISコード 00631-000803	型式 PJ01-ASM1-5Z-L1 TAISコード 00631-000807
サイドタイプ	型式 PJ01-AL TAISコード 00631-000723	型式 PJ01-AL-T TAISコード 00631-000732	型式 PJ01-AL-5Z TAISコード 00631-000767	型式 PJ01-AL-R1 TAISコード 00631-000808	型式 PJ01-AL-5Z-R1 TAISコード 00631-000812	型式 PJ01-AL-L1 TAISコード 00631-000809	型式 PJ01-AL-5Z-L1 TAISコード 00631-000813
	型式 PJ01-ALM1 TAISコード 00631-000727	型式 PJ01-ALM1-T TAISコード 00631-000736	型式 PJ01-ALM1-5Z TAISコード 00631-000768	型式 PJ01-ALM1-R1 TAISコード 00631-000810	型式 PJ01-ALM1-5Z-R1 TAISコード 00631-000814	型式 PJ01-ALM1-L1 TAISコード 00631-000811	型式 PJ01-ALM1-5Z-L1 TAISコード 00631-000815
ロングタイプ	型式 PJ01-BL TAISコード 00631-000724	型式 PJ01-BL-T TAISコード 00631-000733	型式 PJ01-BL-5Z TAISコード 00631-000769	型式 PJ01-BL-R1 TAISコード 00631-000816	型式 PJ01-BL-5Z-R1 TAISコード 00631-000820	型式 PJ01-BL-L1 TAISコード 00631-000817	型式 PJ01-BL-5Z-L1 TAISコード 00631-000821
	型式 PJ01-BLM1 TAISコード 00631-000728	型式 PJ01-BLM1-T TAISコード 00631-000737	型式 PJ01-BLM1-5Z TAISコード 00631-000770	型式 PJ01-BLM1-R1 TAISコード 00631-000818	型式 PJ01-BLM1-5Z-R1 TAISコード 00631-000822	型式 PJ01-BLM1-L1 TAISコード 00631-000819	型式 PJ01-BLM1-5Z-L1 TAISコード 00631-000823
コーナータイプ	型式 PJ01-CS TAISコード 00631-000725	型式 PJ01-CS-T TAISコード 00631-000734	型式 PJ01-CS-5Z TAISコード 00631-000771	型式 PJ01-CS-R1 TAISコード 00631-000824	型式 PJ01-CS-5Z-R1 TAISコード 00631-000828	型式 PJ01-CS-L1 TAISコード 00631-000825	型式 PJ01-CS-5Z-L1 TAISコード 00631-000829
	型式 PJ01-CSM1 TAISコード 00631-000730	型式 PJ01-CSM1-T TAISコード 00631-000739	型式 PJ01-CSM1-5Z TAISコード 00631-000772	型式 PJ01-CSM1-R1 TAISコード 00631-000826	型式 PJ01-CSM1-5Z-R1 TAISコード 00631-000830	型式 PJ01-CSM1-L1 TAISコード 00631-000827	型式 PJ01-CSM1-5Z-L1 TAISコード 00631-000831

※連結バー(R)=連結バー レギュラータイプ、連結バー(L)=連結バー ロングタイプ

連結バーのご使用について


■安全にご使用いただくためにも、指定の位置に必ず「よかレール ストッパー」もしくは「よかレール よかオモシ」を設置してください。

【よかレールストッパーを使用する場合】

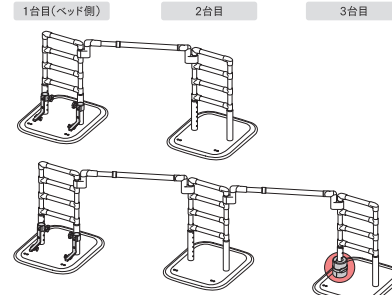

※3台連結する場合、中央にコーナータイプは連結できません。

【よかレールストッパーを使用しない場合】

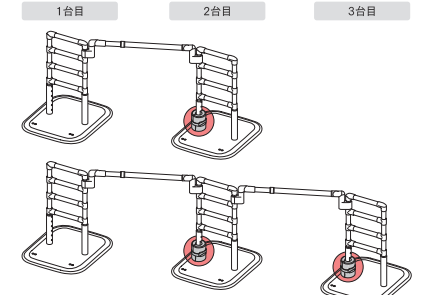

※3台連結する場合、中央にコーナータイプは連結できません。

■連結時の手すり部分の長さ

ご使用前に、ご希望の範囲に手すりが設置可能かご確認ください。



よかレール	連結バー
センター/サイドタイプ 33.5cm	レギュラータイプ 71 ~ 91cm
ロングタイプ 77cm	ロングタイプ 91 ~ 121cm
コーナータイプ 25.5cm	



❗ 連結バー設置の際の注意 | 安全にご利用いただくために、設置の際は以下の点を必ずご確認ください。

連結時の角度の注意

◎よかレールと連結バーの手すり部は、下図の角度では設置しないでください。下図中の●部分に、身体の一部が挟まり怪我をする恐れがあります。

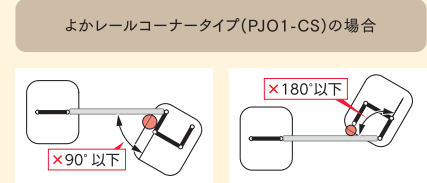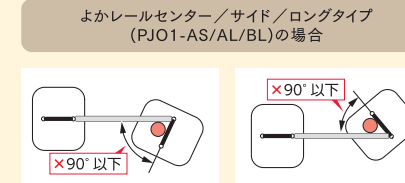

段差がある場所への設置の注意

◎10cmを超える段差がある場所では使用しないでください。

◎よかレールのベースが段差からはみ出ないように設置してください。

